



Getting Started with the **ExoDx™ Prostate Test Collection Kit**

Step-by-Step Instructions
(English)



Don't worry, you got this.


Thanks for choosing the ExoDx™ Prostate Test (EPI).
Simply follow the step-by-step instructions in this guide
to collect your sample right in the privacy of your own home.
It's fast and easy!

Important: Please submit your sample within 48 hours to facilitate
timely release of test results.



View our *How-to-Get Started with the ExoDx Prostate Test* video and follow along with written instructions.

exosomedx.com/gettingstarted

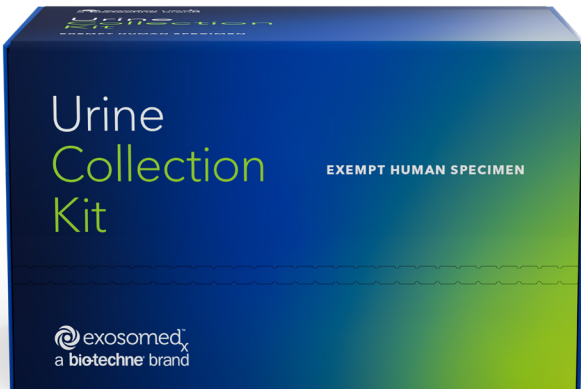

Step-by-Step Instructions:

Day 1

1. **Place the ice packs** (found in the Styrofoam box) **in your freezer** for at least 24 hours.
2. Complete the Patient Information Form provided.


Important: Add the **REQUIRED** Collection Date once the sample is collected.

3. Write your **full name** and **date of birth** on the label provided and attach it to the collection tube.



Important: Add the **REQUIRED** Collection Date once sample is collected.

4. **Stop Here.** Wait 24 hours before completing Day 2 steps.

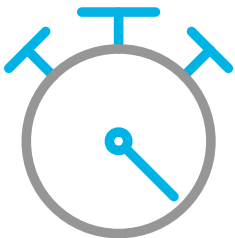

Important: Plan accordingly, samples should only be shipped Monday - Thursday.

Day 2

5. Attach the Colli-Pee Collection Device to the Collection Tube.

Open the green package **labeled Colli-Pee**. Unscrew the green cap on the collection tube (but keep it close by, you'll need it when you're done). Securely attach the tube to the collection funnel.



6. Urinate into the Collection Device.

Place penis into the collection funnel while standing over the toilet. **Start and finish** urine flow into the funnel. (Excess urine will flow out the opposite side).




Important: This should be a 'first catch' urine sample, which means the first 15 mLs of the urine stream, and at least one hour from your last urination.

Day 2

7. Detach the Collection Device and securely Click the Collection Tube Closed.

Once urination is complete, immediately unscrew the funnel from the tube, and replace the green cap on the tube. The cap will click in place when secure. **Do not put the collection device down before screwing the green cap on securely.**

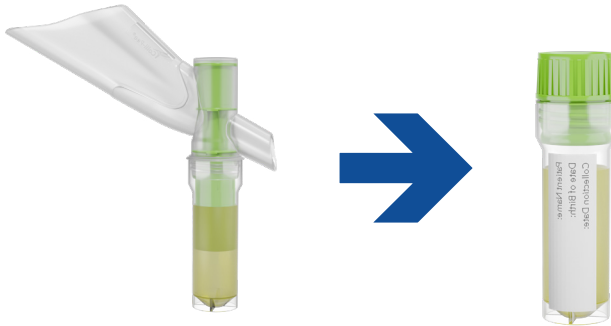

Important: Immediately proceed to Step 8.

8. Prepare sample for shipping.

- Open the provided bio-hazard bag and place the urine tube inside.
- Remove both frozen ice packs from your freezer and **place them horizontally in the Styrofoam urine collection box.**
- If ice packs have not been frozen for 24 hours, sample may be refrigerated until ice packs are ready for shipping.
- Place the urine tube between the two frozen ice packs.
- Replace the Styrofoam lid on the urine collection box. Place the completed Patient Information Form inside the box. **Close the box and seal it with the self adhesive tape strip.**

Choose One of the Shipping Options:

1. Call 1-800-GoFedEx to schedule a pick-up for your pre-labeled **Priority Overnight** box.
2. Drop your sealed box off at a local FedEx pickup location. **Must offer Priority Overnight capability.**
3. Contact Client Services at 844-396-7663 to schedule a pickup.

Helpful Hints:

- Please collect samples Monday - Thursday. Appropriately label the collection tube with the collection date and immediately follow shipping instructions.
- Samples are shipped Priority Overnight with FedEx, but due to unforeseen circumstances could be delayed. Delayed samples may need to be resubmitted.

What's Next?

- Patient results will be delivered to your physician within 3-5 days after receipt of sample.
- Please contact Client Services with any questions on the test, coverage and the ExoCARES program. 844-396-7663 (Option 3, then Option 2).

(844) 396-7663
exosomedx.info@bio-technie.com
266 Second Ave, Suite 200
Waltham, MA 02451





Comenzando con el Kit de **Recolección de Pruebas de Prostata ExoDx.**

Paso-a-Paso Instrucciones
(Español)



No se Preocupe, es Sencillo.


Gracias por elegir la prueba ExoDx Prostate. Simplemente siga las instrucciones paso a paso de esta guía para recoger su muestra en la privacidad de su hogar. Es rápido y fácil!

Importante: Por favor de enviar su muestra dentro de 48 horas para facilitar la publicación oportuna de los resultados de la prueba



**Vea nuestro video
sobre **Cómo
Comenzar con la
Prueba de Próstata
ExoDx y siga las
instrucciones escritas****

exosomedx.com/gettingstarted

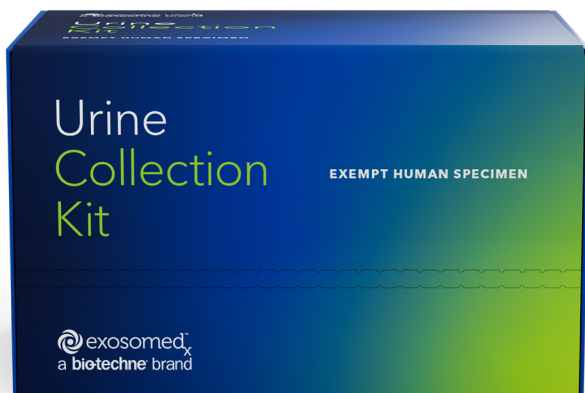

Instrucciones Paso a Paso:

Día 1

1. **Coloque los paquetes refrigerantes** en el Congelador por lo menos por **24 horas**.

2. Complete el Formulario de Paciente.

Recordatorio: Agregue la fecha de recolección requerida una vez que haga la muestra.

3. Escribe tu **nombre completo** y **fecha de nacimiento** en la etiqueta proporcionada y fíjela al tubo de recogida.



Importante: Escribe tu nombre **COMPLETO** y fecha de nacimiento en la etiqueta proporcionada y fíjela al tubo de recogida

4. **Deténgase Aquí.** Espere 24 horas antes de completar pasos del Día 2.



Importante: Las muestras solo deben enviarse de Lunes a Jueves

Dia 2

5. Conecte el Dispositivo de Recolección Colli-Pee al Tubo de Recogida.

Abra el paquete verde con la **etiqueta Colli-pee**. Desenrosque la tapa verde del tubo de recolección (pero manténgala cerca, la necesitará cuando haya terminado). Conecte de forma segura el tubo al embudo de recolección.



6. Orinar en el Dispositivo Recolector.

Coloque el pene en el embudo de recolección mientras está de pie junto al inodoro. **Iniciar y finalizar** el flujo de orina hacia el embudo. (El exceso de orina saldrá por el lado opuesto).




Importante: Esta debe ser una muestra de orina de la “primera toma”, lo que significa los primeros 15 ml del chorro de orina y al menos una hora desde la última vez que orinó.

Dia 2

7. Separe el Dispositivo de Recolección y Cierre Firmemente el Tubo de Recolección.

Una vez que haya terminado de orinar, desenrosque inmediatamente el embudo del tubo y vuelva a colocar la tapa verde en el tubo. La tapa hará clic en su lugar cuando esté segura.

No deje el dispositivo de recolección antes de enroscar firmemente la tapa verde.

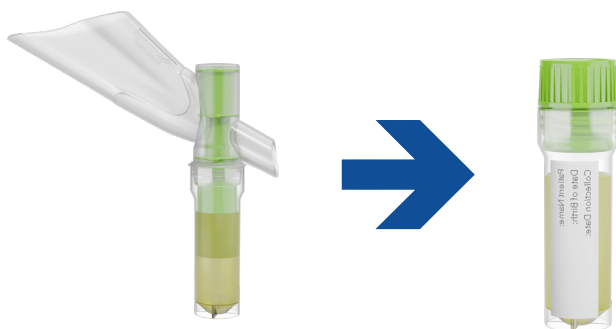

Importante: Proceda inmediatamente al paso 8

8. Prepare la Muestra para el Envío.

- Abra la bolsa de riesgo biológico proporcionada y coloque el tubo de orina adentro.
- Retire ambos paquetes congelados de su congelador y **colóquelos horizontalmente en la caja recolectora de orina de espuma de poliestireno.**
- Coloque el tubo de orina entre los dos paquetes de hielo congeladas.
- Vuelva a colocar la tapa de espuma de poliestireno en la caja de recolección de orina. Coloque el formulario de información del paciente completo dentro de la caja. **Cierra la caja y sella con la tira de cinta autoadhesiva.**

Elija Una de las Opciones de Envío:

1. Llame al 1-800-GoFedEX para programar la recogida de su caja **Priority Overnight** pre-etiquetada.
2. Deje su caja sellada en un punto de recogida local de FedEx. **Debe ofrecer capacidad prioritaria durante la noche.**
3. Llama a atención al cliente por teléfono al 844-396-7663 para programar una recogida.

Consejos Útiles:

- Por favor recoja muestras entre Lunes-Jueves. Etiquete adecuadamente el tubo de recolección con la fecha de recolección y siga inmediatamente las instrucciones de envío.
- Las muestras se envían con prioridad al día siguiente con FedEx, pero debido a circunstancias imprevistas podrían retrasarse. Es posible que sea necesario volver a enviar las muestras retrasadas.

¿Que Sigue?

- Los resultados del paciente se entregarán a su médico dentro de 3 a 5 días después de recibir la muestra.
- Comuníquese con el servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta sobre la prueba, la cobertura y el programa ExoCARES. 844-396-7663 (Opción 3, luego Opción 2).

(844) 396-7663
exosomedx.info@bio-technne.com
266 Second Ave, Suite 200
Waltham, MA 02451

